


diapason
TMR™ TECHNOLOGY

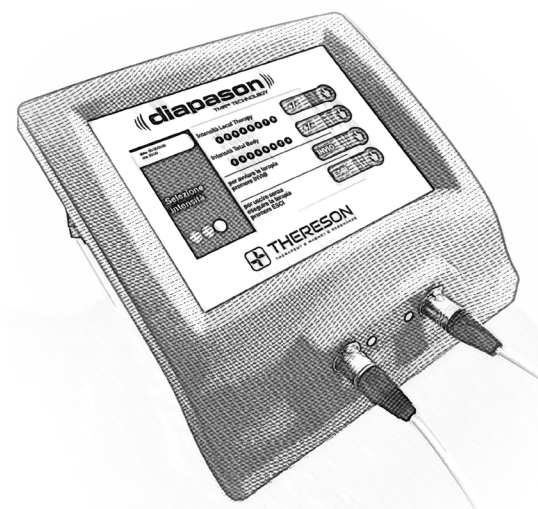

Guida rapida

DIAPASON™ è un dispositivo medico sicuro e molto facile da usare. Seguendo questa guida anche il primo utilizzo sarà semplice e immediato.

Aprire questo foglio e seguire le indicazioni numerate.


Per informazione dettagliate consultare il manuale d'uso.

Avvertenza

La Risonanza Magnetica Terapeutica non presenta controindicazioni. Tuttavia per motivi precauzionali non è consigliato l'uso a pazienti in stato di gravidanza, pediatrici e portatori di pace-maker cardiaco.

THERESON
THERAPEUTIC MAGNETIC RESONANCE


1 Preparazione

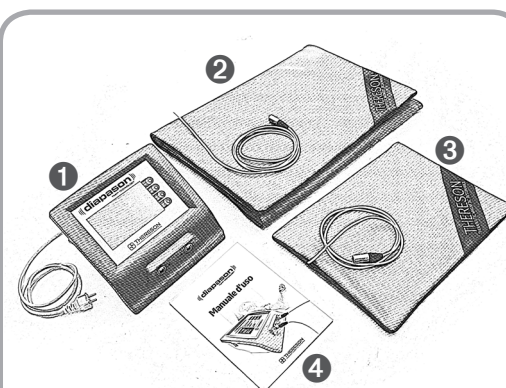


- 1 Unità di Controllo DIAPASON™
- 2 Diffusore (grande) TOTAL BODY
- 3 Diffusore (piccolo) LOCAL THERAPY
- 4 Manuale d'uso

1 Verificare che tutti i componenti siano inclusi e non risultino danneggiati. Se mancano componenti o presentano danni, contattare il rivenditore.


2 Disporre gli elementi su una superficie piana (letto, materassino, pavimento).

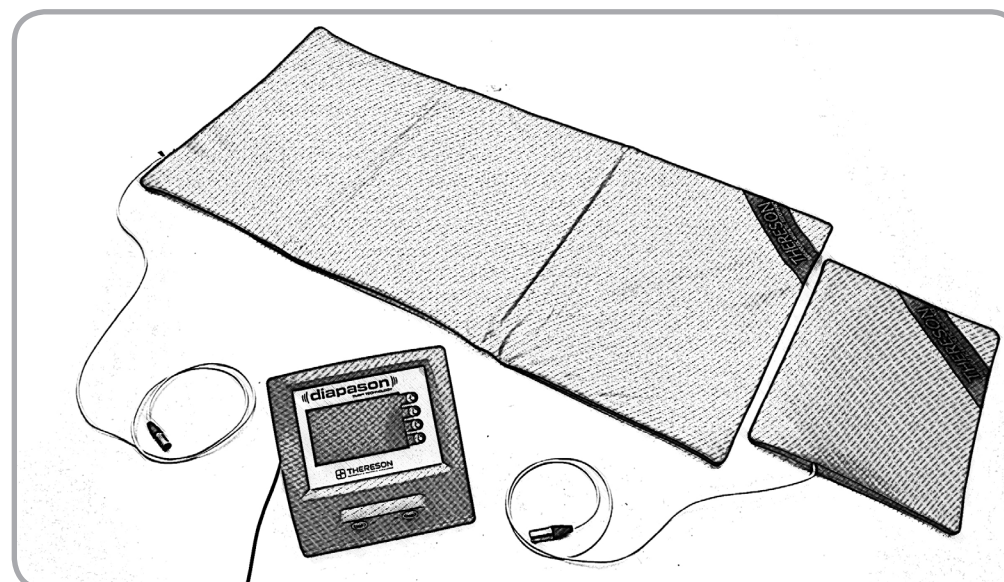


2 Accensione

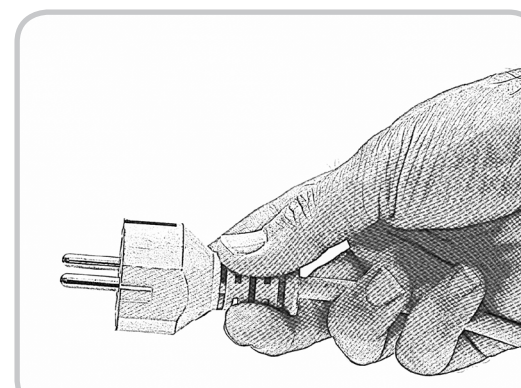

1 Collegare l'Unità di Controllo DIAPASON™ alla rete elettrica.

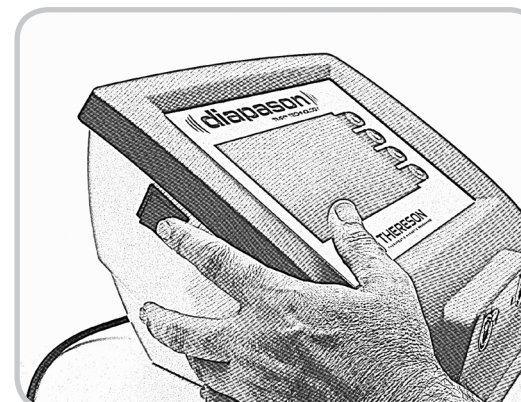

2 Premere il pulsante laterale di accensione. Dopo qualche istante, sullo schermo compare la schermata di avvio.

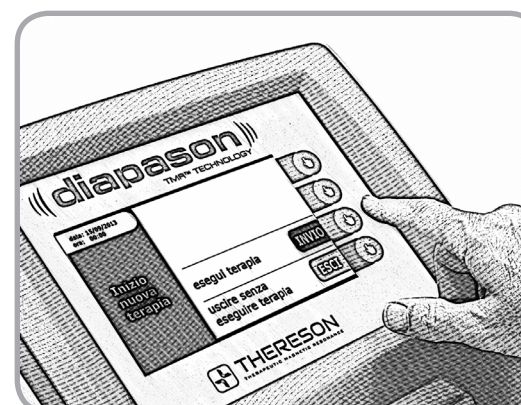

3 Premere **Invio**


Importante!

Lo schermo **non** è sensibile al tatto.


Per selezionare i comandi premere leggermente sulla pulsantiera a contatto a lato dello schermo.

Il sistema emette un beep di conferma a ogni comando ricevuto.


3 Collegamento

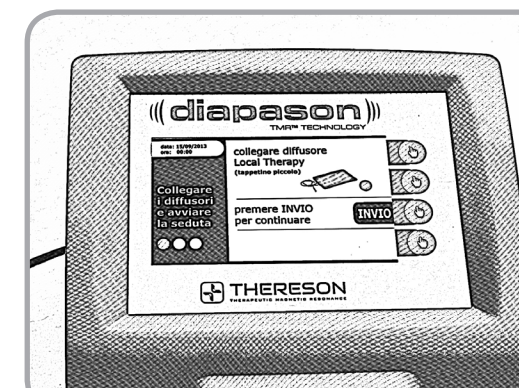

1 Seguire le istruzioni indicate sullo schermo: collegare il diffusore (piccolo) LOCAL THERAPY all'unità di controllo tramite l'apposito cavo.

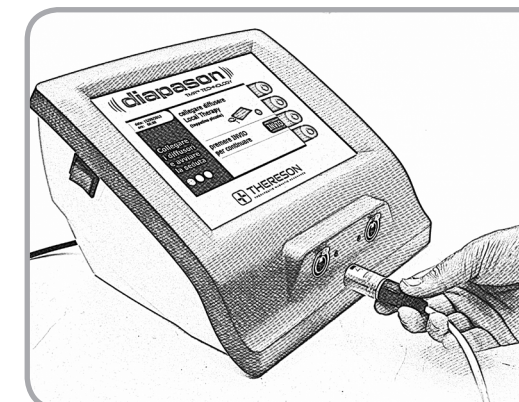

2 Inserire la spina in una delle due prese disponibili, uno scatto metallico segnala che l'aggancio è avvenuto. Sullo schermo compare un segnale verde, premere nuovamente il pulsante **Invio**.

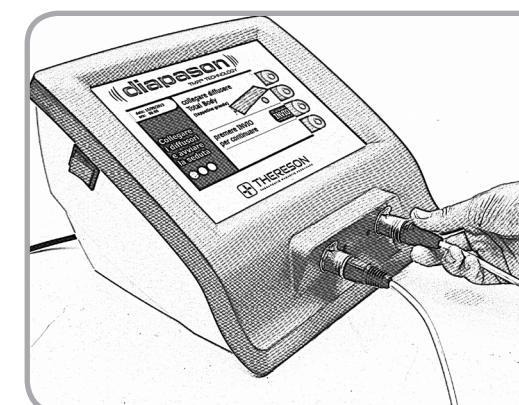

3 Ripetere la stessa operazione per collegare il diffusore (grande) TOTAL BODY. Collegare il cavo alla presa rimasta libera e premere ancora **Invio**.

4 Scelta dell'intensità della terapia



1 Completati i collegamenti, il sistema consente di scegliere l'intensità della terapia.

2 Regolare l'intensità utilizzando i pulsanti a contatto in corrispondenza dei simboli **+/-**

3 La prima settimana di utilizzo impostare i seguenti valori di intensità:
LOCAL THERAPY = 8
TOTAL BODY = 4


Importante!
Per eseguire la terapia non è necessario togliere abiti ed eventuali bendaggi.



5 Inizio della terapia

1 Premere **Invio** per avviare la terapia, L'Unità di Controllo emette un beep e i 2 led verdi iniziano a lampeggiare.

2 Distendersi come indicato in figura. La testa non deve poggiare sui diffusori. Il diffusore (piccolo) LOCAL THERAPY va collocato in corrispondenza dell'ulcera da trattare (ad esempio sotto il piede come mostra la figura).

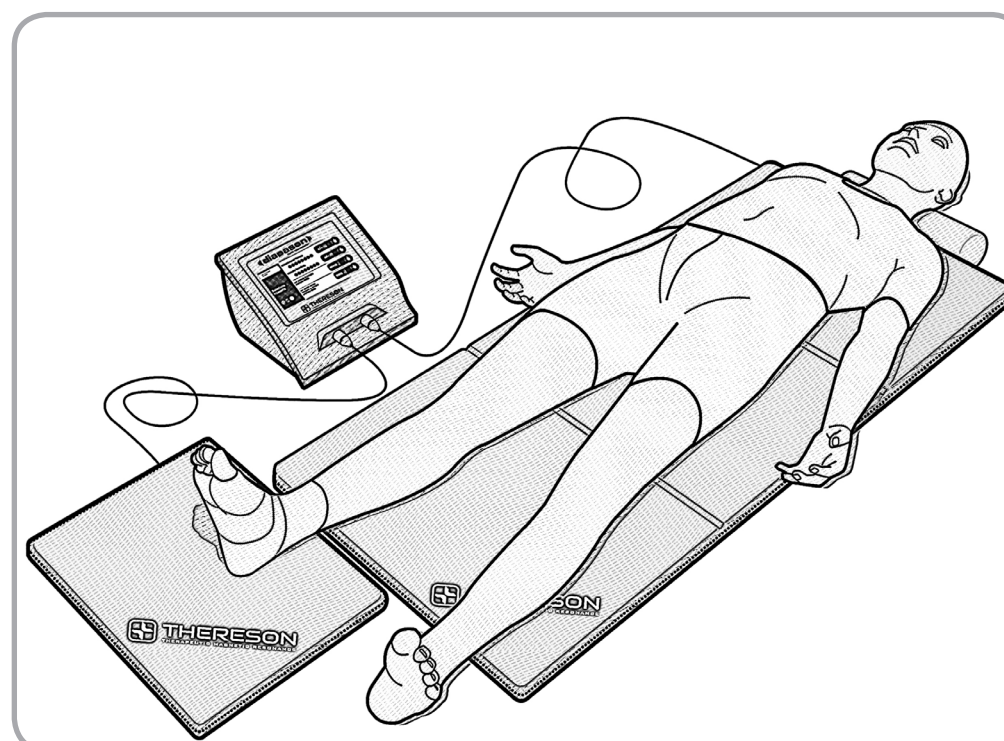

6 Conclusione della terapia





1 Sullo schermo compare la progressione della terapia. La durata completa di una sessione è di circa 24 minuti. Al termine della terapia l'unità di controllo smette di lampeggiare. Data e ora della sessione della terapia vengono memorizzati nel sistema.

2 Sullo schermo viene automaticamente indicata la data della sessione successiva.

Importante!


In qualsiasi istante è possibile interrompere la terapia tenendo premuto per 3 secondi il pulsante **Esci**. In caso di interruzione la sessione dovrà essere ripetuta dall'inizio.

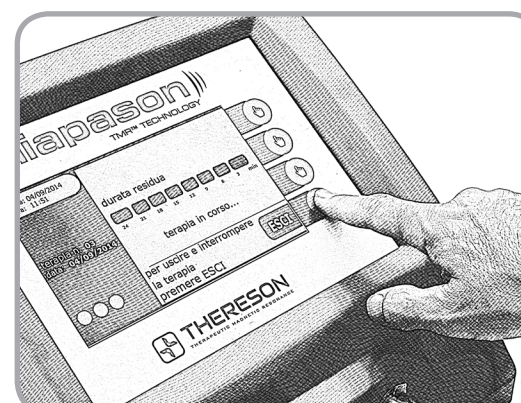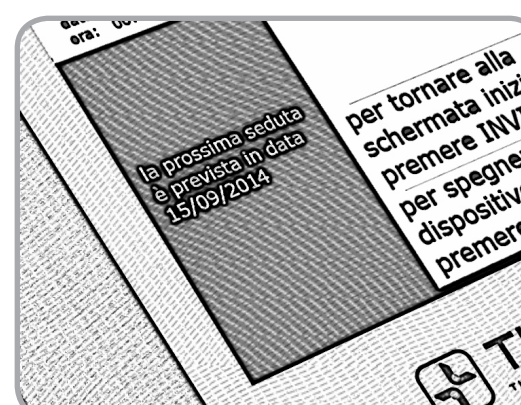

7 Spegnimento e custodia




1 Arrestare il dispositivo tenendo premuto per 3 secondi il pulsante **Esci**. Attendere la comparsa del messaggio "è ora possibile spegnere il dispositivo"

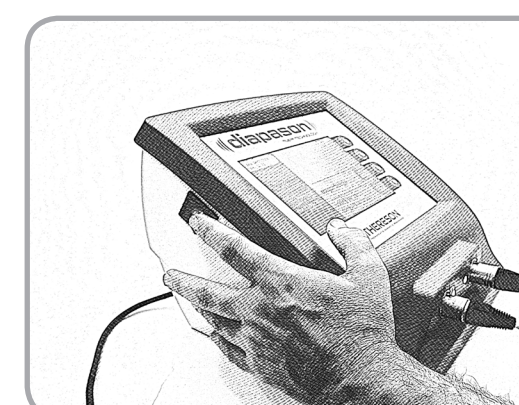

2 Utilizzare l'interruttore laterale per spegnere l'apparecchiatura.

3 Per scollegare i diffusori estrarre i connettori premendo con il pollice sulla levetta metallica per liberare l'aggancio.

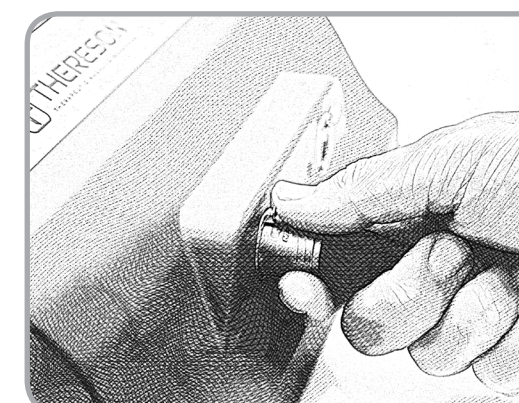

Riporre l'apparecchiatura in un luogo asciutto. I diffusori possono essere ripiegati **ma non arrotolati** (a rischio di danneggiare i componenti interni).